

# Mechanische Säuglingswaage mit Laufgewichten

**seca**  
Präzision für die Gesundheit

## seca 745

- + Immer Einsatzbereit ohne Stromanschluss oder Batterien
- + Gleiche Genauigkeit wie digitale Säuglingswaagen
- + Sämtliche Teile korrosionsresistent: Feuchtigkeit ist kein Problem
- + Wiegemulde abnehmbar zur besseren Reinigung
- + Zusätzliches Laufgewicht für das Wegtariere von Tüchern etc.
- + Je nach Modell mit Libelle und Nivellierfüßen



seca 745

# Mechanische Säuglingswaage mit Laufgewichten



## Hochwertige und extrem präzise mechanische Säuglingswaage


Die seca 745 ist langlebig, robust und mit ihrer ausgefeilten Mechanik extrem präzise. Die Ableseschritte auf dem Laufgewichtsbalken sind fein genug, um mit der Genauigkeit einer digitalen Säuglingswaage mitzuhalten. Mit dem Unterschied, dass die seca 745 auf keine Stromversorgung angewiesen ist. Damit ist die seca 745 wohl eine der zuverlässigsten und präzisesten Säuglingswaagen weltweit.



## Leicht zu desinfizieren und zu reinigen

Während das Baby in der sicheren Mulde mit hohen Seitenwänden liegt, kann mit wenigen Handgriffen das Gewicht ermittelt werden. Die Wiegemulde lässt sich durch das Lösen zweier Arretierhebel von der Basis abnehmen und somit leicht desinfizieren und reinigen. Die Oberfläche der Waage hat eine kratzfeste, widerstandsfähige Versiegelung, das Innenleben ist korrosionsresistent. Damit ist die Waage für schwierige klimatische Verhältnisse gerüstet und liefert auch bei hoher Luftfeuchtigkeit immer präzise Ergebnisse.

Eichklasse	III
Tragkraft	16 kg
Teilung	10 g
Maße (BxHxT)	550 × 180 × 290 mm
Maße Wiegefläche (BxHxT)	550 × 110 × 270 mm
Eigengewicht	6,4 kg
Funktionen	Freie Nullpunktwahl, Nullstelleneinrichtung
Medical Device Regulation (MDR) zertifiziert	

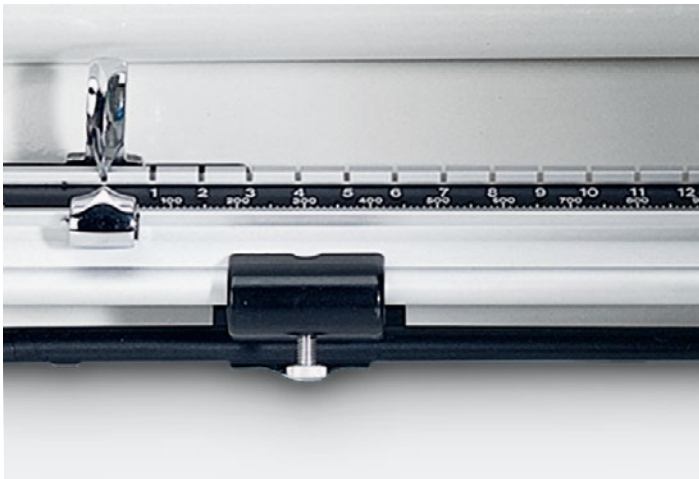

## Waage austarieren und noch präziser wiegen

Die seca 745 ist mit einem Tariergewicht und einer Feintarierschraube ausgestattet. Das erlaubt die sehr präzise Ermittlung des Nettogewichts. Außerdem können aufgelegte Handtücher oder das Gewicht von Windeln wegtariert werden.

Änderungen bleiben vorbehalten.

seca deutschland  
seca gmbh & co. kg  
Hammer Steindamm 3-25  
22089 Hamburg  
Deutschland

T 0800 20 00 005 Deutschland  
T 00800 20 50 50 50 Österreich  
F +49 40 20 00 00 50  
E insidesales.de@seca.com

seca ag schweiz  
Schönmattdamm 4  
4153 Reinach  
Schweiz

T +41 61 711 03 00  
E info.ch@seca.com

Präzision für die Gesundheit  
seca.com